


Instruções de utilização do SuperEBA® da Bosworth

INSTRUÇÕES PARA REVESTIMENTOS

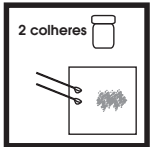


2 colheres

1. Colocar duas colheres de pó numa chapa de vidro ou numa placa misturadora limpa e seca.




1 gota

2. Aplicar uma gota de líquido junto ao pó.

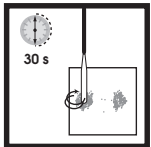

30 s

3. Acrescentar até 3/4 de pó ao líquido e misturar durante 30 segundos usando uma espátula de aço inoxidável, cobalto com liga de cromo ou ágata.

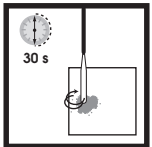

30 s

4. Acrescentar o pó restante e misturar durante mais 30 segundos até se obter uma consistência semelhante a massa espessa.




5. Aplicar a mistura na cavidade com um portatampões de amálgama o qual foi mergulhado em água ou álcool.



6. As exposições podem ser imediatamente restauradas com uma mistura fluida. Pulverizar com água morna para acelerar o tempo de cura.

INSTRUÇÕES PARA CEMENTAÇÃO FINAL

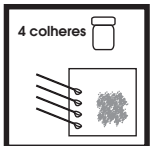


4 colheres

1. Colocar quatro colheres de pó numa chapa de vidro ou numa placa misturadora limpa e seca.




4 gotas

2. Aplicar quatro gotas de líquido junto ao pó.

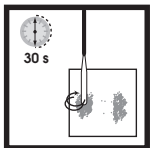

30 s

3. Acrescentar até 3/4 de pó ao líquido e misturar durante 30 segundos usando uma espátula de aço inoxidável, cobalto com liga de cromo ou ágata.

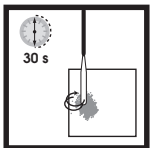


30 s

4. Acrescentar o pó restante e misturar durante mais 30 segundos até se obter uma mistura suave e cremosa.



Maquet

5. Espalhar Bosworth Masque sobre as áreas de restauração circundantes para permitir uma fácil remoção do cimento em excesso.

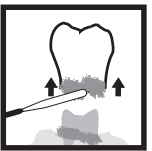

6. Revestir as superfícies de encaixe e rebordos com uma camada fina de cimento. Reter sob uma pressão firme dos dedos até curado.

TEMPO DE CURA (BOCA)

- Curagem padrão (lenta) 10 a 15 minutos
- Cura rápida 4 a 8 minutos

TEMPO DE CURA (CHAPA)

- Curagem padrão (lenta) >15 minutos
- Cura rápida 10 a 15 minutos

SUGESTÕES PARA O USO DE SUPEREBA®

- O nível de latitude ao misturar o SuperEBA® é bastante amplo e será afectado pela temperatura e humidade do consultório dentário. Temperaturas e humidade elevadas podem reduzir o tempo de trabalho e de cura. Temperaturas e humidade baixas podem aumentar o tempo de trabalho e de cura.
- Conforme se familiariza com este tipo de cimento, com o seu fluxo aperfeiçoado, observará que podem ser utilizadas misturas mais espessas do que as recomendadas abaixo para alguns procedimentos de cementação, por exemplo, cementação ortodôntica. Usar misturas mais espessas apenas se considerado prático. É de lembrar que quanto mais espessa a mistura mais forte o cimento.

Líquido	
1) Orto-etoxi Ácido benzóico	62.5%
2) Eugenol	37.5%
Pó	
1) Óxido de zinco	60%
2) Alumina	34%
3) Resina natural	6%

Proporções pó/líquido	
Revestimento	0,26 g de pó – 0,03 g de líquido
Cementação	0,52 g de pó – 0,12 g de líquid

Para ser utilizado exclusivamente por especialistas em tratamento dentário.

Instrucciones de uso del Bosworth SuperEBA®

INSTRUCCIONES PARA REVESTIMIENTOS




2 cucharillas

1. Ponga dos cucharillas de polvo en un platillo seco de vidrio o escudilla de mezcla limpia.




1 gota

2. Dispense una gota de líquido al lado del polvo.

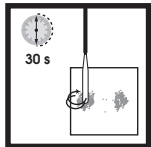

30 s

3. Agregue como máximo 3/4 del polvo al líquido y mezcle durante 30 segundos con una espátula de acero inoxidable, cobalto de cromo o ágata.

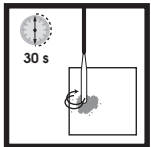

30 s

4. Agregue el resto del polvo y mezcle durante otros 30 segundos hasta que la consistencia sea la de una masilla espesa.



5. Coloque la mezcla en la cavidad con un aplicador de amalgama previamente sumergido en agua o alcohol.



6. Las áreas descubiertas pueden cubrirse directamente con una mezcla diluida. Rocíe con agua caliente para acelerar el tiempo de fraguado.

INSTRUCCIONES PARA LA CEMENTACIÓN FINAL




4 cucharillas

1. Ponga cuatro cucharillas de polvo en un platillo seco de vidrio o escudilla de mezcla limpia.




4 gotas

2. Dispense cuatro gotas de líquido al lado del polvo.

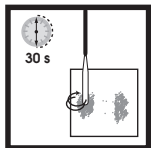

30 s

3. Agregue como máximo 3/4 del polvo al líquido y mezcle durante 30 segundos con una espátula de acero inoxidable, cobalto de cromo o ágata.

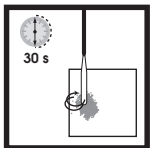

30 s

4. Agregue el resto del polvo y mezcle durante otros 30 segundos hasta que se obtenga una mezcla cremosa fluida.



Maquet

5. Frote las áreas de restauración circundantes con Bosworth Masque para poder quitar fácilmente el exceso de cemento.



6. Recubra la superficie y los rebordes con una capa fina de cemento. Retenga aplicando una presión firme con el dedo hasta que fragüe.

TIEMPO DE FRAGUADO (BOCA)

- Conjunto regular (lento) 10 a 15 minutos
- Fraguado rápido 4 a 8 minutos

TIEMPO DE FRAGUADO (PLATILLO)

- Conjunto regular (lento) >15 minutos
- Fraguado rápido 10 a 15 minutos

SUGERENCIAS PARA EL USO DE SUPEREBA®

- El grado de flexibilidad en la mezcla del SuperEBA® es muy amplio y se verá afectado por la temperatura y la humedad en su consulta. Temperaturas y niveles de humedad altos podrían acortar los tiempos de fraguado y trabajo. Temperaturas y niveles de humedad bajos podrían aumentar los tiempos de fraguado y trabajo.
- Según se vaya acostumbrando a este cemento, con su mayor fluidez, observará que se pueden utilizar mezclas más espesas que las recomendadas a continuación en algunos procedimientos de cementación, por ejemplo: Cementación ortodóncica. Utilice mezclas más espesas sólo si es conveniente. Recuerde que cuanto más espesa sea la mezcla más resistente será el cemento.

Líquido	
1) Orto-Ethoxy Ácido benzóico	62.5%
2) Eugenol	37.5%
Polvo	
1) Óxido de zinc	60%
2) Alúmina	34%
3) Resina natural	6%

Proporciones polvo/líquido	
Revestimiento	0,26 g polvo – 0,03 g líquido
Cemento	0,52 g polvo – 0,12 g líquido

Para uso exclusivo por odontólogos.

ORDERING INFORMATION
BESTELLINFORMATIONEN
INFORMATIONS CONCERNANT LES COMMANDES
INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI
INFORMAÇÃO PARA ENCOMENDA
INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Ref.0921007 – Standard Kit
Bestell-Nr. 0921007 – Standardsatz
Réf. 0921007 – Kit standard
Cat. N° 0921007 – Kit standard
Ref. 0921007 – Kit padrão
Ref. 0921007 – Kit estándar

Ref.0921007R – Standard Kit (Reg.)
Bestell-Nr. 0921007R – Standardsatz (reg.)
Réf. 0921007R – Kit standard (rég.)
Cat. N° 0921007R – Kit standard (normale)
Ref. 0921007R – Kit padrão (normal)
Ref. 0921007R – Kit estándar (normal)

Ref.0921007F – Standard Kit (Fast)
Bestell-Nr. 0921007F – Standardsatz (schnell)
Réf. 0921007F – Kit standard (rapide)
Cat. N° 0921007F – Kit standard (rapido)
Ref. 0921007F – Kit padrão (rápido)
Ref. 0921007F – Kit estándar (rápido)

Ref.0921008 – 15 g Fast Set Powder
Bestell-Nr. 0921008 – Pulver, 15 g, schnell abbindend
Réf. 0921008 – 15 g poudre à prise rapide
Cat. N° 0921008 – 15 g di polvere a presa rapida
Ref. 0921008 – Pó de cura rápida 15 g
Ref. 0921008 – Polvo de fraguado rápido de 15 g

Ref.0921009 – 15 g Regular Set Powder
Bestell-Nr. 0921009 – Pulver, 15 g, normal abbindend
Réf. 0921009 – 15 g poudre à prise normale
Cat. N° 0921009 – 15 g di polvere a presa normale
Ref. 0921009 – Pó de cura normal 15 g
Ref. 0921009 – Polvo de fraguado regular de 15 g

Ref.0921010 – 6.5 mL Liquid Only
Bestell-Nr. 0921010 – 6.5 mL, nur flüssig
Réf. 0921010 – 6,5 mL liquide uniquement
Cat. N° 0921010 – 6,5 mL di solo liquido
Ref. 0921010 – Apenas líquido 6,5 mL
Ref. 0921010 – Sólo líquido de 6,5 mL

Ref.0921011 – Economy Kit
Bestell-Nr. 0921011 – Sparsatz
Réf. 0921011 – Kit économique
Cat. N° 0921011 – Kit economico
Ref. 0921011 – Kit económico
Ref. 0921011 – Kit económico

Ref.0921011R – Economy Kit (Reg.)
Bestell-Nr. 0921011R – Sparsatz (reg.)
Réf. 0921011R – Kit économique (normale)
Cat. N° 0921011R – Kit economico (normale)
Ref. 0921011R – Kit económico (normal)
Ref. 0921011R – Kit económico (normal)

Ref.0921011F – Economy Kit (Fast.)
Bestell-Nr. 0921011F – Sparsatz (schnell)
Réf. 0921011F – Kit économique (rapide)
Cat. N° 0921011F – Kit economico (rapido)
Ref. 0921011F – Kit económico (rápido)
Ref. 0921011F – Kit económico (rápido)



Ref.0921012 – 2 oz. (56 g) Economy Fast-Set Powder
Bestell-Nr. 0921012 – 2-oz-Sparpackung (56 g), Pulver, schnell abbindend
Réf. 0921012 – 2 oz (56 g) poudre à prise rapide, conditionnement économique
Cat. N° 0921012 – 2 oz (56 g) di polvere economica a presa rapida
Ref. 0921012 – Pó de cura rápida económico 2 oz (56 g)
Ref. 0921012 – Polvo de fraguado rápido económico de 2 oz (56 g)

Ref.0921013 – 2 oz. (56 g) Economy Regular-Set Powder
Bestell-Nr. 0921013 – 2-oz-Sparpackung (56 g), Pulver, normal abbindend
Réf. 0921013 – 2 oz (56 g) poudre à prise normale, conditionnement économique
Cat. N° 0921013 – 2 oz (56 g) di polvere economica a presa normale
Ref. 0921013 – Pó de cura normal económico 2 oz (56 g)
Ref. 0921013 – Polvo de fraguado regular económico de 2 oz (56 g)

Ref.0921014 – 1 oz. (29 mL) Economy Liquid
Bestell-Nr. 0921014 – 1-oz-Sparpackung (29 mL), flüssig
Réf. 0921014 – 1 oz (29 mL) liquide, conditionnement économique
Cat. N° 0921014 – 1 oz (29 mL) di liquido economico
Ref. 0921014 – Líquido económico 1 oz (29 mL)
Ref. 0921014 – Líquido económico de 1 oz (29 mL)

Ref.0921006 – SuperEBA® Cement Spatula
Bestell-Nr. 0921006 – SuperEBA®-Zementspatel
Réf. 0921006 – Spatule à ciment SuperEBA®
Cat. N° 0921006 – Spatola per cemento SuperEBA®
Ref. 0921006 – Espátula para cemento SuperEBA®
Ref. 0921006 – Espátula para cemento SuperEBA®

BOSLAB-1-56 0416P154

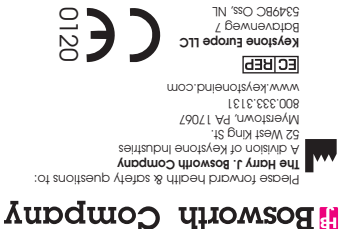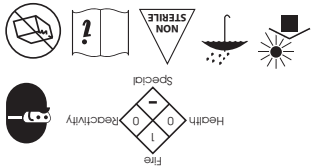

Bosworth SuperEBA®

All Purpose ZOE Lining and Cement
ZOE-Unterfütterungsmaterial und -Zement
Revêtement et ciment ZOE universels
Cemento e sottofondo multiuso ZOE
Cimento e revestimento ZOE para todos os fins
Cemento y revestimiento ZOE para todo propósito




Bosworth SuperEBA® Instructions for Use


DIRECTIONS FOR LININGS




2 scoops

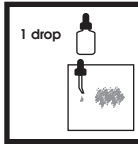

1 drop

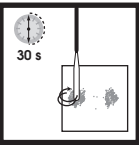

30 s

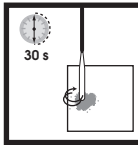

30 s





1. Place two scoops of powder on a clean dry glass slab or mixing pad.

2. Dispense one drop of liquid alongside the powder.

3. Add up to 3/4 of the powder to the liquid and spatulate for 30 sec. using a stainless steel, chromium cobalt or agate spatula.

4. Add the remaining powder and mix another 30 sec. until a thick putty like consistency is obtained.


5. Apply the mixture to the cavity with an amalgam plugger which has been dipped in water or alcohol.

6. Exposures can be directly capped with a thin mixture. Spray with warm water to accelerate setting time.


DIRECTIONS FOR FINAL CEMENTATION




4 scoops

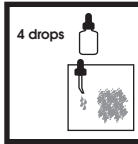

4 drops

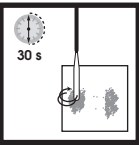


30 s

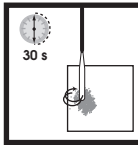

30 s



Masque

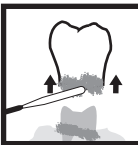

1. Place four scoops of powder on a clean dry glass slab or mixing pad.

2. Dispense four drops of liquid alongside the powder.

3. Add up to 3/4 of the powder to the liquid and spatulate for 30 sec. using a stainless steel, chromium cobalt or agate spatula.

4. Add the remaining powder and mix another 30 sec. until a smooth creamy mix is obtained.

5. Smear surrounding restoration areas with Bosworth Masque to allow easy removal of excess cement.

6. Coat fitting surface and shoulders with a thin film of cement. Retain under steady finger pressure until set.

SETTING TIME (MOUTH)

- Regular (Slow) Set 10-15 minutes
- Fast Set 4-8 minutes

SETTING TIME (SLAB)

- Regular (Slow) Set >15 minutes
- Fast Set 10-15 minutes

TIPS FOR USING SUPEREBA®

- The degree of latitude in mixing SuperEBA® is very wide and will be affected by the temperature and humidity in your operator. Higher temperature and humidity may shorten work and set times. Lower temperatures and humidity may increase work and set times.
- As you become accustomed to this cement, with its improved flow, you will observe that thicker mixes than those recommended below can be used for some cementing procedures, e.g. Orthodontic cementation. Use thicker mixes only if practical. Remember, the thicker the mix the stronger the cement.


Liquid	
1) Ortho-Ethoxy Benzoic Acid	62.5%
2) Eugenol	37.5%
Powder	
1) Zinc Oxide	60%
2) Alumina	34%
3) Natural Resin	6%

Powder/Liquid Ratios	
Lining	.26 g powder - .03 g liquid
Cementing	.52 g powder - .12 g liquid


For use by a dental professional only.

Bosworth SuperEBA®-Gebrauchsanweisung


UNTERFÜTTERUNGSMATERIAL

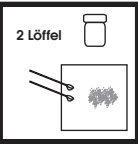


2 Löffel

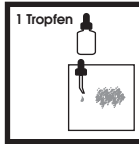

1 Tropfen

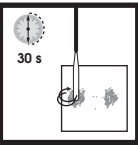

30 s

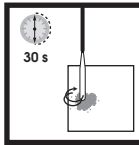

30 s





1. Zwei gehäufte Löffel Puder auf eine saubere und trockene Glasplatte oder ein Anmischtablett geben.

2. Einen Tropfen Flüssigkeit neben das Puder tropfen.


3. Bis zu 3/4 der Pudermenge zur Flüssigkeit geben und mit einem Edelstahl-, Chromkobalt- oder Achatspatel 30 Sekunden lang vermischen.

4. Das übrige Pulver hinzugeben und weitere 30 Sekunden zu einer dicken Paste vermischen.


5. Die Paste mit einem Amalgamstopfer, der zuvor in Wasser oder Alkohol getaucht wurde, auf die Kavität auftragen.

6. Freiliegende Stellen können direkt mit einer dünnen Schicht Paste abgedeckt werden. Mit warmen Wasser abspülen, um die Abbindezeit zu verkürzen.


ABSCHLIESSENDE ZEMENTIERUNG

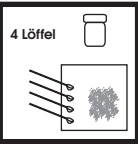


4 Löffel

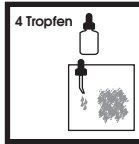

4 Tropfen

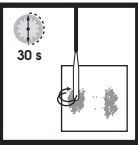

30 s

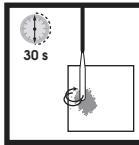

30 s



Masque



1. Vier gehäufte Löffel Puder auf eine saubere und trockene Glasplatte oder ein Anmischtablett geben.

2. Vier Tropfen Flüssigkeit neben das Puder tropfen.

3. Bis zu 3/4 der Pudermenge zur Flüssigkeit geben und mit einem Edelstahl-, Chromkobalt- oder Achatspatel 30 Sekunden lang vermischen.

4. Das übrige Pulver hinzugeben und weitere 30 Sekunden zu einer glatten cremigen Paste vermischen.

5. Bosworth Masque auf die umliegenden Restaurationsbereiche streichen, damit sich überschüssiger Zement leicht entfernen lässt.

6. Eine dünne Schicht Zement auf die behandelte Oberfläche und Schultern auftragen. Gleichmäßigen Fingerdruck ausüben, bis der Zement ausgehärtet ist.

ABBINDEZEIT (MUND)

- Normale Aushärtung (Slow) 10-15 Minuten
- Schnelle Aushärtung 4-8 Minuten

ABBINDEZEIT (ANMISCHPLATTE)

- Normale Aushärtung (Slow) >15 Minuten
- Schnelle Aushärtung 10-15 Minuten

TIPPS ZUR VERWENDUNG VON SUPEREBA®

- Der Spielraum für das Anmischen von SuperEBA® ist sehr groß und wird von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Ihrer Zahnarztpraxis beeinflusst. Höhere Temperaturen und Luftfeuchtigkeit können die Arbeits- und Abbindezeiten verkürzen. Niedrigere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit können die Arbeits- und Abbindezeiten verlängern.
- Nachdem Sie eine Weile mit diesem Zement gearbeitet haben, werden Sie feststellen, dass dank seiner verbesserten Konsistenz dickere Pasten als die nachstehend empfohlenen für einige Zementierungsverfahren verwendet werden können, zum Beispiel für die orthodontische Zementierung. Dickere Zementpasten sollten nur verwendet werden, wenn dies praktisch ist. Je dicker die Mischung, desto stärker ist der Zement.


Flüssigkeit	
1) Ortho-Ethoxy Benzoesäure	62.5%
2) Eugenol	37.5%
Puder	
1) Zinkoxid	60%
2) Aluminiumoxid	34%
3) Naturharz	6%

Puder/Flüssigkeits-Mischverhältnis	
Unterfütterung	0,26 g Puder zu 0,03 g Flüssigkeit
Befestigung	0,52 g Puder zu 0,12 g Flüssigkeit


Nur für den zahnärztlichen Gebrauch

Mode d'emploi de SuperEBA® de Bosworth


PRÉPARATION DU REVÊTEMENT

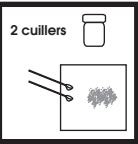


2 cuillers

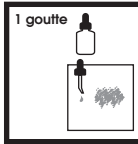

1 goutte

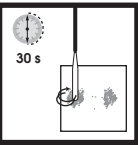

30 s

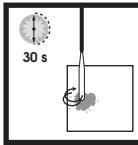

30 s





1. Mettre deux cuillers de poudre sur une lame de verre sèche et propre ou un bloc de mélange.

2. Déposer une goutte de liquide près de la poudre.


3. Prendre les 3/4 de la poudre (pas plus) et les mélanger au liquide avec une spatule en inox, en cobalt de chrome ou en agate pendant 30 seconde.

4. Ajouter le reste de poudre et mélanger pendant 30 seconde jusqu'à l'obtention d'une pâte de la consistance du mastic.


5. Appliquer le mélange sur la cavité avec un fouloir à amalgame préalablement trempé dans de l'eau ou de l'alcool.

6. Les surfaces exposées peuvent être directement couvertes d'une mince couche de mélange. Pulvériser avec de l'eau tiède pour accélérer la prise.


PRÉPARATION DU CIMENT DÉFINITIF

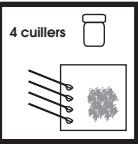


4 cuillers

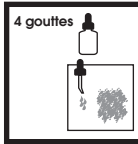

4 gouttes

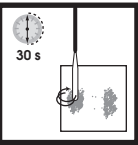

30 s

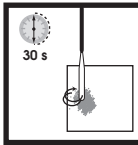

30 s



Masque



1. Mettre quatre cuillers de poudre sur une lame de verre sèche et propre ou un bloc de mélange.

2. Déposer quatre gouttes de liquide près de la poudre.

3. Prendre les 3/4 de la poudre (pas plus) et les mélanger au liquide avec une spatule en inox, en cobalt de chrome ou en agate pendant 30 seconde.

4. Ajouter le reste de poudre et mélanger pendant 30 seconde jusqu'à l'obtention d'un mélange crémeux.

5. Enduire les zones périphériques avec Masque de Bosworth pour rendre le retrait d'excédent de ciment plus facile.

6. Enduire la surface usinée et les épaulements d'un mince film de ciment. Appuyer avec les doigts et maintenir une pression régulière jusqu'à la prise.

TEMPS DE PRISE (EN BOUCHE)

- Prise normale (lente) 10 à 15 minutes
- Prise rapide 4 à 8 minutes

TEMPS DE PRISE (SUR LAME)

- Prise normale (lente) >15 minutes
- Prise rapide 10 à 15 minutes

CONSEILS D'UTILISATION POUR SUPEREBA®

- Le degré de latitude de mélange de SuperEBA® est très large et est influencé par la température et l'humidité de l'endroit où vous opérez. Une température et une humidité élevées peuvent réduire le temps de travail et de prise. Une température et une humidité basses peuvent augmenter le temps de travail et de prise.
- Au fur et à mesure que vous vous habituez à ce ciment au fluage amélioré, vous remarquerez que des mélanges plus épais que ceux recommandés ci-dessous peuvent être utilisés pour certaines procédures de cimentation, par ex. la cimentation orthodontique. N'utilisez des mélanges plus épais que lorsque cela est plus pratique. Rappelez-vous que plus le mélange est épais, plus le ciment est solide.


Liquide	
1) Ortho-éthoxy Acide benzoïque	62.5%
2) Eugénol	37.5%
Poudre	
1) Oxyde de zinc	60%
2) Alumine	34%
3) Résine naturelle	6%

Rapports poudre/liquide	
Revêtement	0,26 g poudre - 0,03 g liquide
Ciment	0,52 g poudre - 0,12 g liquide

Réservé aux dentistes.

Istruzioni per l'uso della polvere Bosworth SuperEBA®


ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL SOTTOFONDO

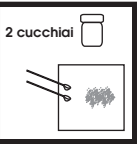


2 cucchiari



1 goccia

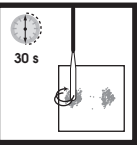

30 s

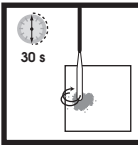

30 s





1. Trasferire due cucchiari dosatori di polvere su un vetrino o su un blocco di miscelazione pulito ed asciutto.

2. Dispensare una goccia di liquido accanto alla polvere.


3. Aggiungere al liquido circa 3/4 della polvere e miscelare per 30 secondi con una spatola in acciaio inossidabile, lega cromo-cobalto o agata.

4. Aggiungere il resto della polvere e miscelare per altri 30 secondi, fino ad ottenere un composto denso di consistenza pastosa.


5. Applicare la miscela nella cavità usando un plugger spingiamalgama intinto in acqua o alcool.

6. La polpa dentaria esposta può essere incappucciata direttamente con uno strato sottile di miscela. Spruzzare con acqua tiepida per ridurre il tempo di presa.


ISTRUZIONI PER LA CEMENTAZIONE DEFINITIVA

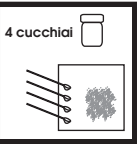


4 cucchiari

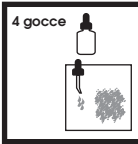

4 gocce

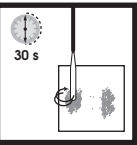

30 s

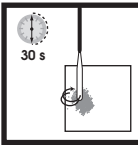

30 s



Masque



1. Trasferire quattro cucchiari dosatori di polvere su un vetrino o su un blocco di miscelazione pulito ed asciutto.

2. Dispensare quattro gocce di liquido accanto alla polvere.

3. Aggiungere al liquido circa 3/4 della polvere e miscelare per 30 secondi con una spatola in acciaio inossidabile, lega cromo-cobalto o agata.

4. Aggiungere il resto della polvere e miscelare per altri 30 secondi, fino ad ottenere un composto di consistenza cremosa ed omogenea.

5. Per facilitare la rimozione del cemento in eccesso, applicare sulle aree circostanti al restauro del Bosworth Masque.

6. Rivestire con un sottile strato di cemento la superficie di applicazione e i bordi. Mantenere una pressione costante con un dito fino al completamento del processo di presa.

TEMPO DI PRESA (CAVO ORALE)

- Presa (Slow) normale 10 a 15 minuti
- Presa rapida 4 a 8 minuti

TEMPO DI PRESA (SU BLOCCO)

- Presa (Slow) normale >15 minuti
- Presa rapida 10 a 15 minuti

SUGGERIMENTI PER L'USO DELLA POLVERE SUPEREBA®

- Le variabili di miscelazione della polvere SuperEBA® sono molto estese e dipendono dalla temperatura e dall'umidità dello studio dentistico di utilizzo. I livelli elevati di temperatura ed umidità possono ridurre i tempi di lavoro e di presa. I bassi livelli di temperatura ed umidità possono aumentare i tempi di lavoro e di presa.
- Con la pratica, si osserverà che con questo cemento, grazie alle sue migliorate qualità di flusso, è possibile usare miscele più dense di quelle consigliate qui di seguito per alcune procedure di cementazione, come ad esempio, nelle cementazioni per ortodonzia. Usare miscele più dense solo se opportuno. Tenere presente che più densa è la miscela, più resistente è il cemento.

Liquido	
1) Ortho-Ethoxy di acido benzoico	62.5%
2) Eugenol	37.5%
Polvere	
1) Ossido di zinco	60%
2) Allumina	34%
3) Resina naturale	6%

Rapporti polvere/liquido	
Sottofondo	0,26 g di polvere - 0,03 g di liquido
Cementazione	0,52 g di polvere - 0,12 g di liquido

Esclusivamente ad uso di operatori odontoiatrici.