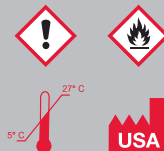


 4 x 1.2ml Dry Rite


 PULPDENT Corporation • 80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.
www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com

PULPDENT® Dry-Rite Drying Agent

Contains Ethyl Alcohol

For use in appropriate clinical situations where residual moisture may effect bonding or cementation.

PULPDENT DRY-RITE is a preparation of anhydrous ethyl alcohol with an organic solvent. It is packaged in 1.2 ml syringes for easy handling, and pre-bent needles are provided for controlled dispensing.

Note: Apply disposable barrier sleeves/wraps over multiple-use dental dispensers before use with each patient. For additional information, refer to: <http://www.fda.gov/MedicalDevices/ProductsandMedicalProcedures/DentalProducts/ucm404472.htm>

INDICATIONS

For use in clinical applications requiring totally dry surfaces. Use Dry-Rite prior to applying hydrophobic pit and fissure sealant or other materials adversely effected by the presence of moisture. It is also used to remove moisture from pits and fissures prior to acid etching.

PRECAUTIONS

1. Dry-Rite with ethyl alcohol is flammable. Handle with care and keep away from open flame.

2. Do not place Dry-Rite directly on dentin as this can desiccate the dentinal tubules.

DIRECTIONS FOR USE

1. Remove syringe cap and place a 22 gauge red dropper tip on the syringe.
2. Isolate the operative area in the mouth to maintain a clean dry field.
3. Rinse the operative area and air dry with clean, uncontaminated, oil-free and moisture-free compressed air.
4. Dispense a small amount of Dry-Rite on the desired surface. For maximum control of flow, do not push on plunger with thumb. It is recommended instead to hold syringe barrel between forefinger and thumb while resting the plunger in palm of hand. Gently pull back with thumb and forefinger to start flow. Use a new dropper tip for each patient.
5. To promote rapid drying, use a gentle flow of clean, uncontaminated air if desired.

Français

DRY-RITE

Agent Déssicant

Pour le séchage complet des surfaces dentaires avant l'application de la résine de scellement des puits et fissures et des autres agents adhésifs lors des reconstitutions composites et des scellements d'éléments prothétiques.

"DRY RITE" est une préparation d'alcool éthylique anhydre associé à un solvant organique.

Precautions d'emploi

1. Dû à l'alcool qu'il contient, manipuler "DRY RITE" avec précaution et le tenir éloigné d'une flamme.

2. Ne pas appliquer "DRY RITE" directement sur la dentine, pour ne pas assécher les tubulis dentinaires.

Mode d'emploi

1. Placer en embout rouge sur la seringue.
2. Isoler le champ opératoire avec une digue ou des rouleaux de coton pour maintenir la zone sèche et propre.
3. Rincer le champ opératoire et le sécher avec un jet d'air exempt d'humidité ou d'huile.
4. Déposer une petite quantité de "DRY RITE" sur la surface à traitée. Utiliser un nouvel embout pour chaque patient.
5. Pour accélérer le séchage du produit, utiliser un léger jet d'air exempt d'humidité ou d'huile.

Deutsch

DRY-RITE

Trocknungsmittel

Pulpdent Dry-Rite setzt sich aus Ethylalkohol und einem organischen Lösungsmittel zusammen. Die 1.2 ml Spritzenverpackung erlaubt eine vereinfachte Handhabung, und die vorgebogenen Nadeln stellen die kontrollierte Applikation von Dry-Rite auf der Zahnoberfläche sicher.

Indikationen

Zur Sicherstellung von kompletter Trockenheit bei klinischen Situationen, die absolut trockene Oberflächen verlangen. Dry-Rite wird benutzt vor der Fissurenversiegelung oder bei anderen feuchtigkeitsempfindlichen Materialien. Dry-Rite eignet sich ebenfalls zur Trocknung des Fissurenbereichs vor der Schmelzätzung.

Vorsichtsmassnahmen

1. Dry-Rite enthält Ethylalkohol und ist brennbar. Vorsicht bei der Anwendung und bei offenen Flammen.

2. Da Dry-Rite die Dentintubuli austrocknen kann, darf es nicht auf Dentin angewendet werden.

Gebrauchsanweisung

1. Entfernen Sie die Deckkappe der Spritze und platzieren Sie eine Applikationskanüle.
2. Isolieren Sie das Operationsfeld im Mund zum sauberen und trockenen Arbeiten.
3. Spülen Sie das Operationsfeld und trocknen Sie mit sauberer, unkontaminierter, öl- und feuchtigkeitsfreier Luft.
4. Applizieren Sie wenig Dry-Rite auf die gewünschte Oberfläche. Drücken Sie nicht mit dem Daumen auf den Stempel. Zur besseren Kontrolle der Applikationsmenge empfiehlt sich das Halten der Spritze mit Daumen und Zeigefinger, und Drücken des Stempels mit dem Handballen. Benützen Sie für jeden Patienten eine neue Applikationskanüle.
5. Um die Wirkung zu beschleunigen, trocknen Sie mit sauberer, unkontaminierter Luft.

Italiano

DRY-RITE

Agente Essiccatore

Pulpdent Dry-Rite è un composto di alcool etilico con un solvente organico. La confezione consiste di siringhe da 1,2 ml che favoriscono un maneggio semplice, e l'ago curvato assicura l'applicazione controllata di Dry-Rite sulla superficie dentale.

Indicazioni:

Per ottenere un'asciugatura totale nelle situazioni cliniche che richiedono delle superfici assolutamente asciutte. Dry-Rite viene usato prima della sigillatura di fessure oppure nel contesto di altri materiali sensibili all'umidità. Dry-Rite si presta anche all'asciugatura di fessure prima di un trattamento di mordenzazione dello smalto.

Misure di sicurezza:

1. Dry-Rite contiene dell'alcool etilico ed è infiammabile. Quindi attenzione durante l'uso; evitare fiamme aperte.

2. Siccome Dry-Rite può essicare i tubuli di dentina, non deve essere applicato sulla dentina.

Istruzioni per l'uso:

1. Togliere il coperchio della siringa e attaccare un bocchino rosso d'applicazione.
2. Isolare la zona dell'operazione nella bocca per assicurare un lavoro pulito e asciutto.
3. Sciacquare la zona dell'operazione e essicare con aria pulita e non contaminata, cioè aria ne umida, ne oleosa.
4. Applicare poco di Dry-Rite sulla superficie rispettiva. Non premere il puntello con il pollice. Per controllare bene la quantità applicata, si raccomanda di tenere la siringa fra pollice e indice, e di premere il puntello con il palmo della mano. Utilizzare un nuovo bocchino d'applicazione per ogni paziente.
5. Per accelerare l'effetto, asciugare con aria pulita, non contaminata.

Español

DRY-RITE

Agente Secante

El Dry-Rite de Pulpdent es una preparación de alcohol etílico anhidro con un solvente orgánico. Embalado en jeringas de 1,2 ml para facilitar la dosificación, con agujas predobladas que permiten dispensarlo directa y controladamente sobre superficies dentales.

Indicaciones

Para garantizar un secado total en situaciones clínicas que requieran superficies absolutamente secas. Utilice Dry-Rite antes de sellantes de fosas y fisuras u otros materiales que se vean afectados en forma adversa por la presencia de humedad. También se utiliza para evitar la humedad en fosas y fisuras antes del grabado ácido.

Precauciones

1. Dry-Rite con alcohol etílico es inflamable. Manéjese con cuidado y manténgase lejos de las llamas.

2. No coloque Dry-Rite directamente sobre dentina porque puede disecar los túbulos dentinarios.

Instrucciones De Uso

1. Retire la tapa y coloque una punta predoblada roja en la jeringa.
2. Aísle el sector de operación en boca para mantener un campo limpio y seco.
3. Lave el sector y seque con aire no contaminado, libre de aceite y humedad.
4. Dispense una pequeña cantidad de Dry-Rite sobre la superficie deseada. Para un máximo control del dispensado, no empuje en émbolo con el pulgar. Se recomienda sostener la jeringa entre el índice y el pulgar, dejando descansar el émbolo en la palma de la mano. Tire suavemente con el pulgar y el índice para que el producto comience a fluir. Cambie la punta con cada paciente.
5. Para promover un secado rápido, puede utilizarse (en forma suave) aire no contaminado.

XK-DRY-IN-02w
REV: 10/2017



PULPDENT Corporation

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.
Tel. (617) 926-6666 / (800) 343-4342 / Fax (617) 926-6262
pulpdent@pulpdent.com • www.pulpdent.com